



3M
 St. Paul, Minnesota, USA
 1-800-243-4630
1860 Series Respirators

**THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY
 IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:**

		RESPIRATOR COMPONENTS			CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		FILTERING FACEPIECE			
TC-	PROTECTION ¹	1860	1860S	8612F	
84A-0006	N95	X	X		ABCJMNP
84A-4526	N95			X	ABCJMNP

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N - never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to User's Instructions, and / or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

Rev. F: 11-19-07



3M 授权:



3M 个人健康护理产品特约经销商

授权期限: 2019年8月12日 至 2020年

涵盖区域: 中国大陆地区

涵盖市场: 医疗卫生零售批发

证书编号: 001

欢迎至 www.3m.com/chn 了解授权信息

被授权方不得以任何方式将上述授权转授权或再授权给任何第三方。



总裁: Stephen M. Shafer




3M

1860

Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask
Respirateur contre les particules pour soins de santé et
masque chirurgical

Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para
cuidado de la salud

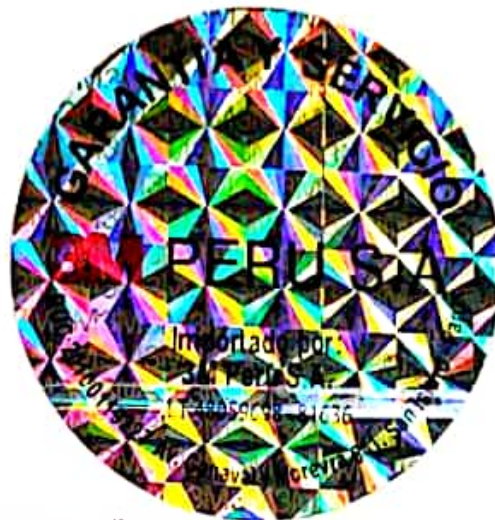

! **IMPORTANT:** Before use, the wearer must read and understand these user *Instructions* inside. **Misuse may result in sickness or death.**

Not intended for Individual resale.

! **IMPORTANT :** L'utilisateur doit lire et comprendre les *directives d'utilisation* situées à l'intérieur de la boîte avant l'utilisation. **Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.**

Ce produit ne peut être vendu à l'unité.

! **IMPORTANTE:** Antes de usar el producto, el usuario debe leer y entender las *Instrucciones* incluidas en el interior. **El mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.**

No está etiquetado para uso Individual.

20 

contenido 20 respiradores



Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask
 Respirateur contre les particules pour soins de santé et
 masque chirurgical

Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para
 cuidado de la salud



Adjustable noseclip
 Pince nasale réglable
 Clip nasal ajustable

Cushioning nosefoam
 Bande nasale en mousse
 Espuma nasal

Comfort straps
 Courroies confortables
 Bandas para comodidad

3M™ Proprietary Filter Media
 Matériau filtrant 3M™ exclusif
 Medio filtrante 3M™




Not made with natural rubber latex.
 Exempt de latex de caoutchouc naturel.
 No hecho de mezcla natural de látex
 de hule.

Fluid Resistant.
 Résistant aux fluides.
 Resistente a fluidos.

Meets CDC guidelines for *M. tuberculosis* exposure control.
 Ce produit est conforme aux directives des CDC pour le contrôle de l'exposition à *M. tuberculosis*.
 Cumple con los criterios de Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en
 inglés) para control de exposición a *M. tuberculosis*.

! **IMPORTANT:** See insert inside for complete *Fitting and User Instructions* before using.
! **IMPORTANT :** Avant l'utilisation, consulter la notice à l'intérieur de la boîte pour les *directives d'ajustement*
 et d'utilisation complètes.
! **IMPORTANTE:** Antes de usar el producto, consulte el inserto en el interior para obtener las *Instrucciones* de
 uso y ajuste.

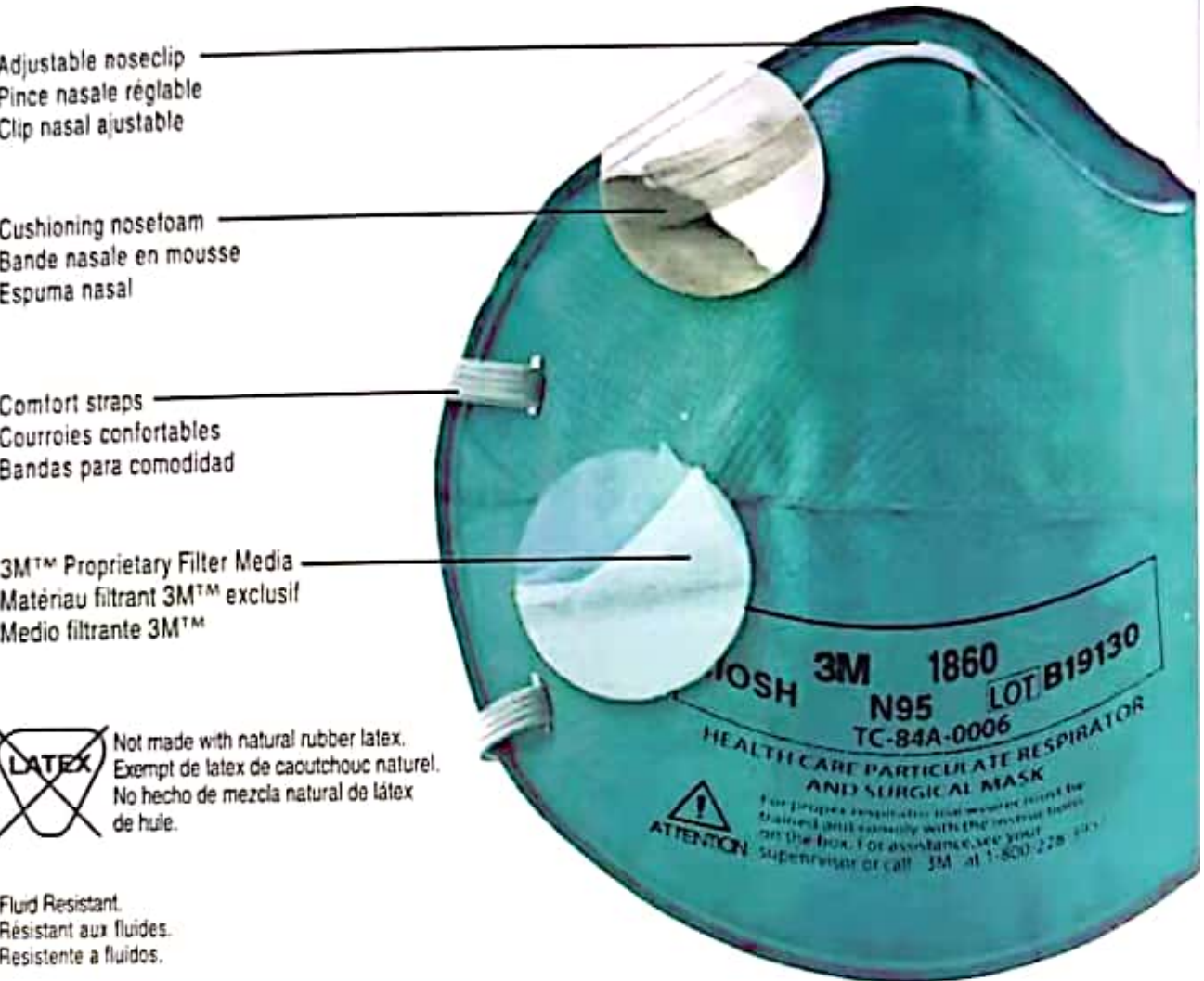

3M

N95

Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask
Respirateur contre les particules pour soins de santé
et masque chirurgical

Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para
cuidado de la salud

1860



Meets CDC
guidelines for
M. tuberculosis
exposure
control

20 

contenido 20 respiradores



Do Not Reuse
Ne pas reutiliser
No reutilizar